

FISIOFORT

Esteira Massageadora

RESIDENCIAL

Instruções de uso



ESTEIRA MASSAGEADORA RESIDENCIAL | Instruções de uso



A **Esteira Massageadora Residencial** é um aparelho elétrico de massagem vibratória, indicada para alívio de stress, fadiga e cansaço físico. Relaxa os músculos e ativa a circulação sanguínea.

Em nosso portfólio temos dois modelos: o modelo SD e o modelo com Perfilado Terapêutico.

Modelo SD - Mostra em quais pontos está sendo realizada a massagem, permite aumentar ou diminuir a intensidade da vibração, alternar os tipos de massagem, além de acionar o calor, quando desejar.

Modelo com Perfilado Terapêutico, denominado "Rabatan" - Contém espuma terapêutica, que aumenta o poder da massagem relaxando mais a musculatura do corpo. Seu controle possui 20 tipos de massagens relaxantes, que massageiam os quatro pontos do corpo: pescoço, lombar, coxas e panturrilhas. Também tem função térmica, na região da lombar, controlada digitalmente entre as temperaturas 37°C e 41°C.

O controle é digital, possui display alfa numérico, ou seja, é possível saber quanto tempo resta de massagem, qual intensidade da massagem, o tipo massagem e se algum ponto do corpo está selecionado. O aquecimento, quando acionado, faz com que o teclado acenda em vermelho. Além disso, o controle possui tecnologia SMD e timer de 05 em 05 minutos ao máximo de 60 minutos.

Na superfície, as espumas em formato anatômico são montadas e alocadas para fornecer total conforto aos músculos e a coluna vertebral, proporcionando ainda mais relaxamento muscular para todo o corpo.

Está disponível nas cores preto e branco e podem ser instaladas em sofás, camas, chaises, chão, entre outros.

• MODELO SD

Para começar a usar a **Esteira Massageadora Residencial**, mantenha apertado o botão ligar. ①

- É o botão ligar que controla as Funções de Vibração.
- Ao iniciar a **Esteira Massageadora Residencial**, ela estará no modo automático.
- Pressione novamente o botão ligar para sair do modo automático e entrar no modo manual para controlar as Funções.

MODOS AUTOMÁTICO

Funções automáticas ①

Troca de função de 1 em 1 minuto. O modo automático é contínuo, ou seja, quando acionado ele continuará a partir da vibração atual. Para identificar se ele está acionado, basta verificar se o círculo ao lado da palavra auto ② está com o led ligado.

MODOS MANUAL

Funções:

Para trocar as Funções de Vibração da **Esteira Massageadora Residencial**, basta apertar o botão ligar. ① A cada clique a esteira troca para a próxima função, e ao passar pelas 16, volta ao modo automático. (Acompanhe qual pontos estão sendo massajeados durante cada função através do desenho no controle ②)

2 CALOR

Quando pressionar o botão calor da **Esteira Massageadora Residencial**, o círculo da ampoleta vermelha ficará com o led ligado.

Logo após, a esteira irá se aquecer durante 30 minutos e depois se auto desligará.

Caso a esteira já esteja ligada, conta-se o tempo de desligamento com referência na vibração, ou seja, se a esteira estiver ligada à 20 minutos e você pressionar o botão calor, a esteira irá desligar totalmente em 10 minutos.

Para desligar a função, basta pressionar o botão novamente.




3 PONTOS

Cada vez que for pressionado esse botão, ele irá desligar alguns pontos e ligar outros. É possível fazer 16 combinações de pontos. (Acompanhe os pontos acionados através do desenho no controle (a))

4 POTÊNCIA

É a intensidade da vibração. Ela sempre iniciará no 0 (mínimo).

Pressionando o + você pode aumentá-la até a intensidade 7 (máximo). Para diminuí-la basta pressionar o botão - quantas vezes que necessário, podendo voltar até a potência mínima.

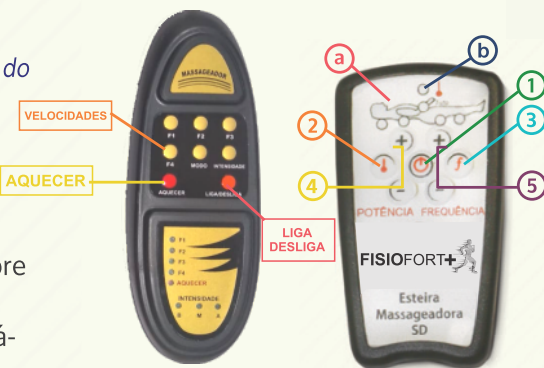

5 FREQUÊNCIA

A Frequência inicia-se no 0 (mínimo). Pressionando o + você pode aumentá-la até a frequência 10 (máxima). Para diminuí-la basta pressionar o botão - quantas vezes que necessário, podendo voltar até a frequência mínima. A Frequência determina o espaço de tempo entre as vibrações de acordo com o ponto, potência ou função que você selecionou.



• MODELO RABATAN

Coloque a **Esteira Massageadora Residencial** na tomada, e seu display acenderá e aparecerá a seguinte mensagem: *Desligado, press o botão menu.* ①

Conheça as funções:

② **Tempo** | **Vibração** | **Potência** | **Pontos** | **Calor** | **Auto**

Ao apertar a seta > ③, aparecerá a primeira função. Para ir à próxima função basta apertar novamente a seta >, e assim sucessivamente, até chegar à função automática. Veja como funciona cada função:

TEMPO

Ao ligar o **Esteira**, o tempo padrão é de 15 minutos. Você ainda pode aumentar e diminuir o tempo em 05 minutos de cada vez, acionando os botões + e - ④.

VIBRAÇÃO

Há 20 tipos de vibrações. A cada toque no botão + você muda o tipo de vibração, indo do 01 até o 20. A última vibração é a automática.

POTÊNCIA

A potência varia entre 0 (mínimo) e 07 (máximo). Para mudar a intensidade utilize os botões + e - ④.



LIMPEZA DO PRODUTO

- Desligue da tomada antes de limpar.
- Não use pano úmido para a limpeza, apenas seco. Caso o contole esteja engordurado, utilize uma quantidade mínima de álcool em um pano.
- Não utilize produtos de limpeza fortes ou substâncias abrasivas, pois podem danificar a parte externa do aparelho.
- Não passe álcool enquanto o produto estiver quente.
- Caso a unidade fique sem ser usada por um longo período, por favor, limpe e guarde-a em um saco plástico e/ou uma caixa.

RECOMENDAÇÕES

- Antes de usar o produto, leia atentamente o manual
- Insira o plug de energia quando a unidade estiver desligada
- Sempre remova o pino da tomada após o uso
- Não é aconselhável usar em pessoas com doenças contagiosas
- É proibido a utilização em banheiros ou locais que estejam molhados
- Não guarde a **Esteira Massageadora Residencial** na presença de calor ou inflamáveis
- Não pule sobre a esteira, pois poderá prejudicar seus mecanismos
- Nunca abra ou viole o tecido da esteira, caso isso aconteça o produto perde a assistência de fábrica
- O usuário nunca deve tentar consertar o aparelho. Por favor, entre em contato com o distribuidor
- Aconselhamos o usuário da **Esteira Massageadora Residencial** que primeiramente utilize velocidades moderadas, começando cada sessão apenas com poucos minutos. Gradualmente, aumente o tempo, intensidade e vibração de acordo com as suas necessidades

CERTIFICADO DE GARANTIA

(Intransferível)

Nos termos e condições abaixo, a Esteira Massageadora Residencial, de propriedade do Sr(a) _____ está garantido por 12 meses contra possíveis erros de fabricação.

Condições de Garantia

Apresentando qualquer avaria V.sa. deverá entrar em contato imediato com a empresa para que seu aparelho seja revisado, obedecendo os seguintes critérios:

1. Dentro do período de vigência de garantia, quando a avaria se der por defeito de fabricação, a revisão é gratuita.
2. Nos casos de avaria por descuido ou uso incorreto, será feita a revisão do aparelho avariado mediante o pagamento de uma taxa de 30% (trinta por cento) do preço atual, mesmo vigência da presente garantia.
3. Ocorrendo a avaria após a vigência da garantia, V.sa. terá direito a revisão do aparelho mediante o pagamento da taxa tratada no item "2" acima.
4. Em caso de rompimento de lacre ou violação do "ziper" a presente garantia se torna sem efeito.

Data: _____ de _____ de _____

QUANDO NÃO HOUVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SUA CIDADE, O NOSSO MEIO DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO SERÁ A ENCOMENDA NORMAL PELOS CORREIOS.

www.fisiofortmais.com.br

(41) 3298-6921

FISIOFORT

www.fisiofortmais.com.br

R. Jundiáí do Sul, 321 - LOJA 2
Sítio Cercado / Curitiba - PR, 81935-040

(41) 3298-6921