



FISIOFORT+

Saúde & Estética



**Eletroestimulador
Neuromuscular Portátil**



 **0800 200 4007**

Atendimento em todo Brasil

Introdução:

Obrigado por adquirir o **Eletroestimulador Neuromuscular Portátil**. Neste manual você encontrará informações que lhe ajudará a compreender todas as funções do aparelho PRO Alívio, temos certeza que você ira se surpreender nos primeiros instantes de uso.

O PRO Alívio foi desenvolvido para aliviar dores musculares, estresse, relaxar e eliminar tensões sobre várias áreas do seu corpo.

Com isso, conseguimos ajudar a você e sua família de várias maneiras, como por exemplo:

- *Eliminar dores corporais;*
- *Diminuição dos níveis de estresse;*
- *Melhorar a qualidade do sono;*
- *Redução de dores na articulação;*
- *Ativa a circulação sanguínea.*

O que é dor?

A dor é desagradável, sensitiva e emocional, conforme descreve alguns cientistas. Geralmente esta associada à lesão real ou potencial dos tecidos, sendo vivenciada por quase todos os indivíduos.

A origem da dor pode ser central (Sistema Nervoso Central) ou periférica, esta última ligada aos grandes grupos musculares como abdômen, coxa e lombar.

A neuro estimulação elétrica transcutânea – TENS é a base do PRO Alívio e implica a enviar pequenos impulsos elétricos de baixa tensão a um grupo muscular ou a um nervo específico, proporcionando uma simples, segura e efetiva solução para o problema da dor.

Aplicações:

- Alívio de dor aguda e crônica
- Lombalgias e cervicalgias
- Desvios posturais escoliose, cifose e lordose.
- Hérnia de disco
- Contratura muscular
- Lombocotalgias – Inflamação do nervo ciático
- Fortalecimento muscular
- Distensões musculares
- Torcicolos
- Artrose
- Entorses
- Relaxamento muscular

Áreas de Uso:




OMBRO



COXA



ANTEBRAÇO

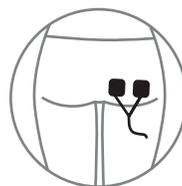


NÁDEGAS



ABDÔMEN



**POSTERIOR
COXA**

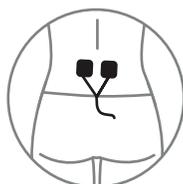

LOMBAR



PANTURRILHA

Posições meramente ilustrativas.

Produto:

O PRO Alívio foi desenvolvido conforme especificações exigidas pela ANVISA, ROHS, CE e INMETRO. Sua construção foi pensada para proporcionar facilidade no uso e segurança ao usuário, sendo ela toda digital. Sua caixa é em plástico ABS anti impacto e antichama e seu sistema inovador de segurança, reconhece quando não está em contato com a pele e diminui a intensidade automaticamente.

O produto é composto de quatro partes, uma fonte de alimentação, um par de eletrodos autoadesivos de silicone, o manual de utilização e a central de comando.

Fonte de Alimentação



Central de Comando

Par de eletrodos



Utilização:

Insira os eletrodos no local da tensão muscular, pegue o eletrodo de silicone e fixe bem. Você pode utilizar elásticos ou fitas adesivas, caso queira ou seja necessário.

Conecte os eletrodos na entrada frontal do aparelho.

Insira a fonte de alimentação atrás do aparelho, no ponto de conexão.

Para ligar o produto é só apertar o botão  , e para desligar é só apertar o botão  .

Intensidade – são 10 níveis, que ficam na parte central do aparelho, descrito por 05 leds, sendo de 01 a 05.

O selecionar o botão  o led piscará informando o primeiro nível, ao pressionar mais uma vez, o mesmo estará aceso constante, informando que está no segundo nível. São 05 níveis de cores AMARELO, LARANJA, VERMELHO, MAGENTA E ROXO. Cada cor compreende dois níveis de intensidade.



- 01 Botão Ligar e aumentar a intensidade
- 02 Alterar o tipo de estímulo
- 03 Diminuir a intensidade
- 04 Tipos de estímulo
- 05 Níveis de Intensidade



Modos: são 12 níveis de estímulos elétricos, cada um com uma finalidade diferente.



Modo 01: Enrijecimento contínuo do estímulo, em 60hz, indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos.



Modo 02 : Enrijecimento pausado do estímulo, com 60hz, indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos e curtos.



Modo 03: Enrijecimento pausado do estímulo durante 0,5 segundo, com 60hz, indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos e curtos, com alto índice de gordura, tais como abdômen e glúteos.



Modo 04: Enrijecimento contínuo do estímulo, em 30hz, indicado para analgesia dos grupos musculares longos.



Modo 05: Enrijecimento pausado do estímulo, com 30hz, indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos e curtos.



Modo 06: Enrijecimento pausado do estímulo durante 0,5 segundo, com 30hz, indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos e curtos, com alto índice de gordura, tais como abdômen e glúteos.

À partir deste ponto a luz começa a piscar, diferenciando os modos de massagem da primeira sequência.



Modo 07: Enrijecimento contínuo do estímulo, em 15hz, indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos.



Modo 08: Enrijecimento pausado do estímulo, com 15hz, indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos e curtos.



Modo 09: Enrijecimento pausado do estímulo durante 0,5 segundo, com 60hz, indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos e curtos, com alto índice de gordura, tais como abdômen e glúteos.



Modo 10: Enrijecimento contínuo do estímulo, em 06hz, indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos.



Modo 11: Enrijecimento pausado do estímulo, com 06hz, indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos e curtos.



Modo 12: Enrijecimento pausado do estímulo durante 0,5 segundo, com 60hz, indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos e curtos, com alto índice de gordura, tais como abdômen e glúteos.

Instruções de Segurança:

Antes de ligar o PRO Alívio, algumas precauções básicas devem ser seguidas:

- Use o aparelho somente para os fins descritos no manual;
- A higienização do aparelho pode ser feito através de álcool 70% líquido, aplicado no pano;
- Nunca aplicar ou espirrar produto de limpeza diretamente no aparelho;
- O produto só funcionará se estiver conectado à pele;
- Os eletrodos de silicone autoadesivos, naturalmente perdem a adesividade e podem ser substituídos quando necessário.

Os eletrodos de silicone, podem ser adquiridos através de nosso site, www.fisiofortmais.com.br ou em qualquer casa médica de sua região.

Esperamos que após ter lido o manual do PRO Alívio, você desfrute de todo o poder do aparelho.

Imagem meramente ilustrativa.



CERTIFICADO DE GARANTIA

(Intransferível)

Nos termos e condições abaixo, de propriedade do Sr(a) _____

está garantido por 12 meses contra possíveis erros de fabricação.

Condições de Garantia

Apresentando qualquer avaria V.sa. deverá entrar em contato imediato com a empresa para que seu aparelho seja revisado, obedecendo os seguintes critérios:

1. Dentro do período de vigência de garantia, quando a avaria se der por defeito de fabricação, a revisão é gratuita.
2. Nos casos de avaria por descuido ou uso incorreto, será feita a revisão do aparelho avariado mediante o pagamento de uma taxa de 30% (trinta por cento) do preço atual, mesma vigência da presente garantia.
3. Ocorrendo a avaria após a vigência da garantia, V.sa. terá direito a revisão do aparelho mediante o pagamento da taxa tratada no item "2" acima.
4. Em caso de rompimento de lacre a presente garantia se torna sem efeito.

Data: _____ de _____ de _____.

QUANDO NÃO HOUVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SUA CIDADE,
O NOSSO MEIO DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO SERÁ
ENCOMENDA NORMAL PELOS CORREIOS.



0800 200 4007
Atendimento em todo Brasil
www.fisiofortmais.com.br